

Aesculap Surgical Instruments

Noir Dissecting Scissors



DISSECTING SCISSORS PRÄPARIERSCHEREN *Noir*

With the new Aesculap NOIR Scissors you will experience a new dimension of cutting and dissecting.

The special features permit very fine and smooth cutting with minimal force. The combination of the very well approved Aesculap tungsten carbide technology with the Aesculap NOIR coating results in an extremely high surface hardness and therefore high wear resistance in daily hospital use.

Mit der neuen NOIR Scherengeneration erleben Sie eine neue Dimension des Schneidens und Präparierens.

Die speziellen Eigenschaften der Aesculap Noir Präparierscheren ermöglichen ein noch feineres und schonenderes Präparieren mit minimalem Kraftaufwand. Die Verbindung der bewährten Aesculap Hartmetall Technologie mit der Aesculap Noir Beschichtung führt zu einer extrem hohen Oberflächenhärte und damit zu einer hohen Verschleißbeständigkeit im täglichen Klinikeinsatz.

The particularly delicate shape permits smooth dissection even in very delicate tissue structures.

Die besonders grazile Form erlaubt ein müheloses Präparieren auch in feinsten Gewebestrukturen.






The extremely hard (2000HV) and low reflection NOIR coating supports the wear resistance of the instruments and at the same time provides high resistance against corrosion.

Die extrem harte (2000HV) und reflexionsarme Noir Beschichtung unterstützt die Verschleißfestigkeit bei gleichzeitig hoher Korrosionsbeständigkeit.

Microtome edge - the extremely sharp cutting edge of the scissors blade facilitates gentle cutting of tissue with minimal use of force.

Mikrotomschliff - besonders scharfer Anschlag des Scherenblattes für sanftes durchtrennen des Gewebes bei minimalem Kraftaufwand.

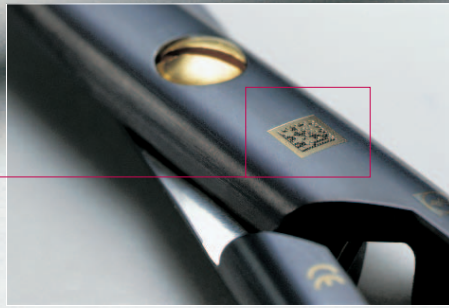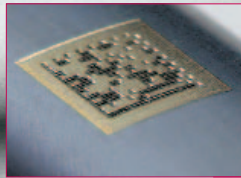
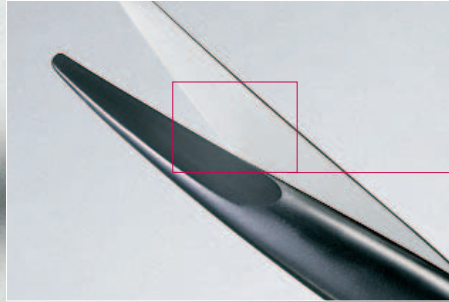


Data matrix code - allows fast machine-readable instrument tracking with instrument management software such as instacount® PLUS.

Data Matrix Code - ermöglicht ein schnelles, maschinenlesbares Instrumententracking mit einer Instrumenten Management Software wie instacount® PLUS.

Wavecut prevents tissue from slipping out during the cutting process.

Wellenschliff verhindert das Herausgleiten des Gewebes während des Schneidens.

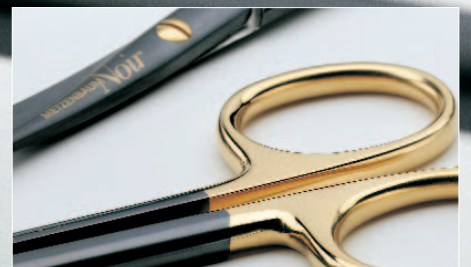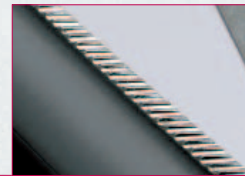

DISSECTING SCISSORS
PRÄPARIERSCHEREN *Noir*



»grazil«

very delicate design
besonders schlankes Design

»grazil«



1/1

BC257B
115 mm



Dissecting Scissors NOIR, curved
Präparierschere NOIR, gebogen

»grazil«



1/1

BC259B
145 mm



BABY-METZENBAUM
Dissecting Scissors NOIR, curved
Präparierschere NOIR, gebogen



BC261B
145 mm



METZENBAUM
Dissecting Scissors NOIR, curved
Präparierscheren NOIR, gebogen



BC263B
180 mm



BC265B
200 mm



BC271B
180 mm

»grazil«



BC275B
200 mm



BC283B
165 mm



BC284B
165 mm



MAYO-LEXER
Dissecting Scissors NOIR, curved
Präparierscheren NOIR, gebogen

DISSECTING SCISSORS PRÄPARIERSCHEREN *Noir*





Wavecut prevents tissue from slipping out during the cutting process.



Wellenschliff verhindert das Herausgleiten des Gewebes während des Schneidens.



»grazil«

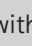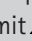very delicate design
besonders schlankes Design



Dissecting Scissors NOIR
with  wavecut, curved
Präparierschere NOIR,
mit  Wellenschliff, gebogen

BABY-METZENBAUM
Dissecting Scissors NOIR
with  wavecut, curved
Präparierschere NOIR,
mit  Wellenschliff, gebogen

METZENBAUM
Dissecting Scissors NOIR
with  wavecut, curved
Präparierschere NOIR,
mit  Wellenschliff, gebogen

»grazil«

»grazil«



BC263WB
180 mm




BC265WB
200 mm



BC271WB
180 mm



BC275WB
200 mm

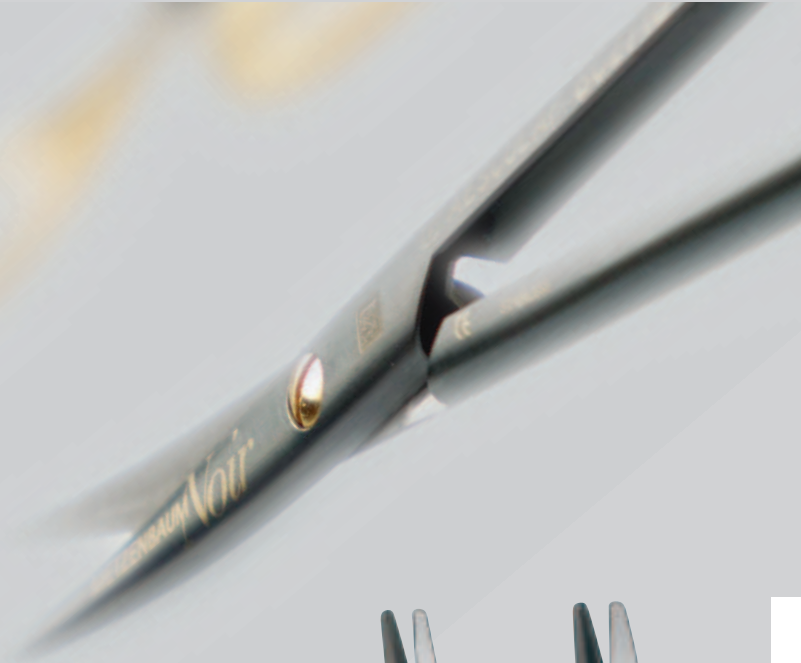

BC283WB
165 mm



BC284WB
165 mm



MAYO-LEXER
Dissecting Scissors NOIR
with **W**avecut, curved
Präparierscheren NOIR,
mit **W**ellenschliff, gebogen



AESCULAP®

B | BRAUN
SHARING EXPERTISE

Aesculap AG & Co. KG

Am Aesculap-Platz
78532 Tuttlingen

Phone +49 7461 95-0

Fax +49 7461 95-2600

www.aesculap.de

All rights reserved. Technical alterations are possible. This leaflet may be used for no other purposes than offering, buying and selling of our products. No part may be copied or reproduced in any form. In the case of misuse we retain the rights to recall our catalogues and pricelists and to take legal actions.