




Instrumenten- aufbereitung

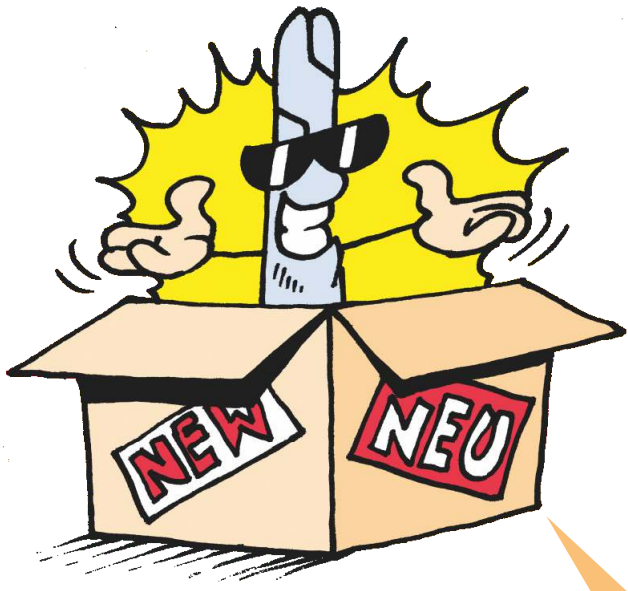

Operations- saal

- Bestimmungsgemäßer Gebrauch
- Instrumente der trocken- oder Nassentsorgung zuführen




Instrumenten- reinigung

- In geöffnetem Zustand reinigen
- Mit vollentsalztem Wasser nachspülen
- Ausreichend trocknen



Sicht-und Funktionsprüfung

- Gelenke / Reibungsflächen ölen

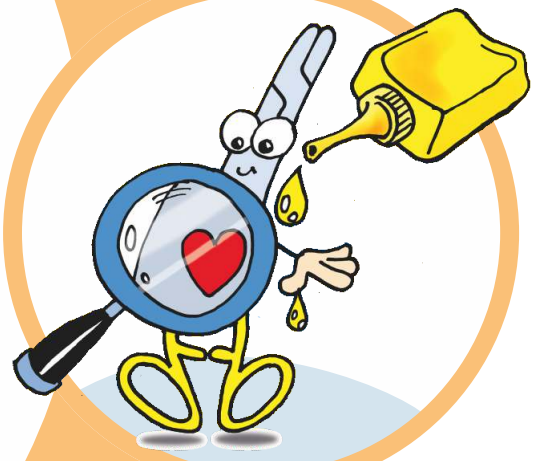


Dampf- Sterilisation

- Nur vollentsalztes Wasser verwenden
- Bei 134 °C
- Normen beachten




Sortieren & Verpacken

- Instrumente mit Sperre öffnen
- Siebe nicht überfüllen

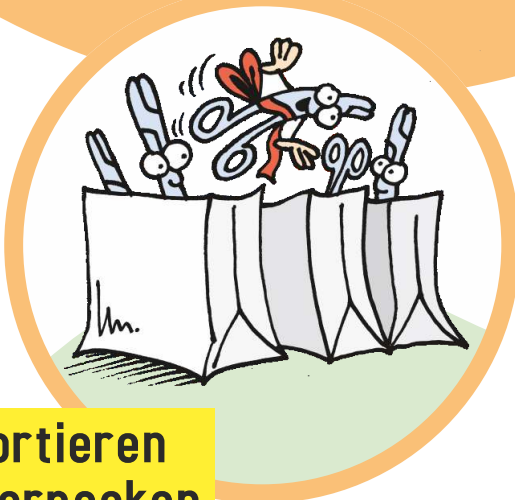

Defekte Instrumente

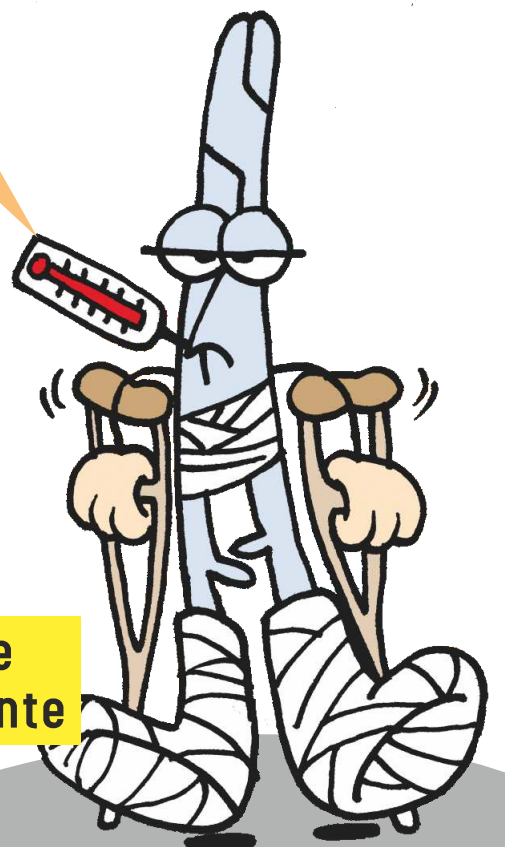

HEBUmedical GmbH
Badstraße 8
78532 Tuttlingen / Germany

Tel. +49 7461 9471 0
Fax +49 7461 9471 22

info@HEBUmedical.de
www.HEBUmedical.de